


# INTEGRAÇÃO NOVIGEST COM CARESTREAM

## Posto que irá guardar as imagens

Configuração para o posto que vai guardar as imagens de RX:

Aplicações clínicas externas			
Executável App1	C:\Program Files (x86)\Carestream\Dental Imaging Software\TW.exe	Parâmetro	
Dir. Base	C:\ng_carestream	Integração	Care Stream

Se existirem mais postos com Carestream, a pasta **C:\ng\_carestream** deverá ser partilhada na rede com permissões de escrita e leitura para Todos os utilizadores, conforme seguinte figura:

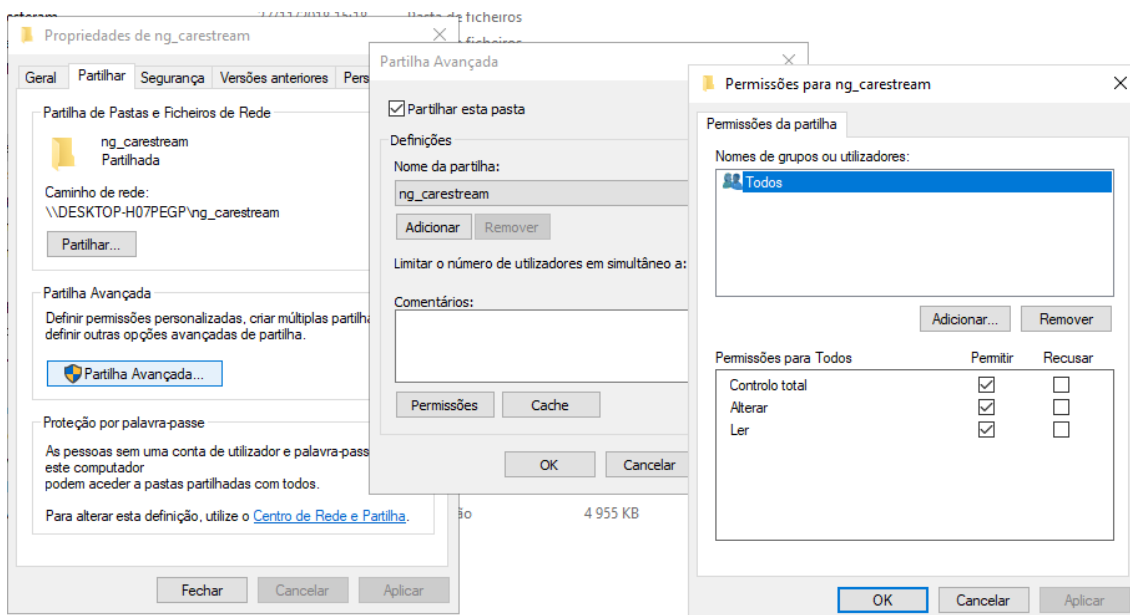

## Restantes posto com Carestream instalado

Configuração para os restantes postos com Carestream:

Aplicações clínicas externas			
Executável App1	C:\Program Files (x86)\Carestream\Dental Imaging Software\TW.exe	Parâmetro	
Dir. Base	\\pc_raiox\ng_carestream	Integração	Care Stream

NOTA: Este caso assume que o computador que guarda as imagens (RXs) tem o nome: **pc\_raiox**.